

適倍樂/適喘樂 舒沛噴吸入劑(1)

初次使用前準備



1 拔開透明底座
按住安全扣並拔下透明底座




2 裝藥罐
藥罐窄端對準吸入器開口



3 用力壓
倚著桌面將藥罐完全壓入吸入器裡
(一旦插入後不可再取出)

4 蓋回透明底座

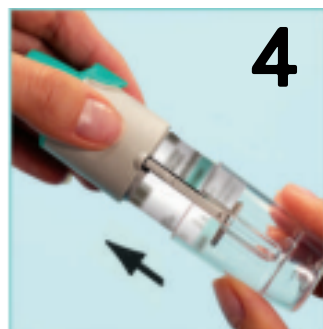

5 旋轉透明底座
將透明底座依標籤上之黑色箭頭方向旋轉，直到聽到「卡嗒」聲

6 打開綠色保護蓋




7 試噴
吸入器朝向地面，按壓給藥按鈕
試噴完蓋回綠色保護蓋

• 重覆步驟5-7三次，直到噴出霧狀的藥液

適倍樂/適喘樂 舒沛噴吸入劑(2)

平常使用

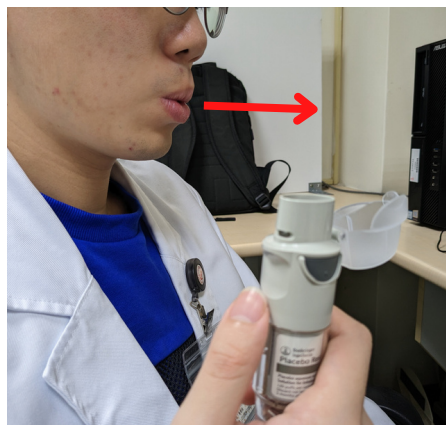

1

旋轉透明底座

旋轉前確定綠色保護蓋是蓋緊的
將透明底座依標籤上之黑色箭頭方向旋轉，直到聽到「卡嗒」聲

2

打開綠色保護蓋

3

吐氣

避開吸嘴後，將肺中空氣完全吐出

4

按壓+吸入

吸嘴置於牙齒之間，雙脣含著吸嘴
(舌頭放在吸嘴下方)
按下給藥按鈕同時深深吸氣

5


閉氣

嘴巴離開吸嘴後閉氣5-10秒

6

蓋上綠色保護蓋

慢慢吐氣後，回復正常呼吸
擦拭吸嘴後蓋回保護蓋

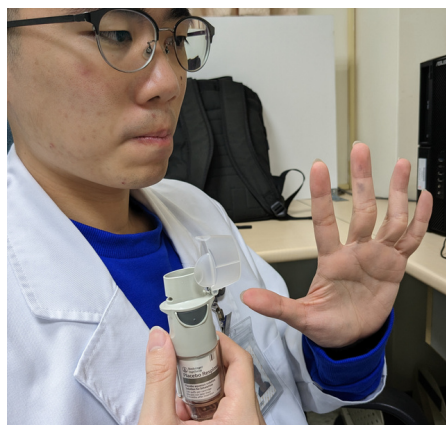

注意事項：

- 若需吸第二個劑量，請間隔30秒再重複步驟1-6
- 可用濕布或濕紙巾清潔口含器及口含器內的金屬部份
- 口含器如出現輕微褪色，不會影響吸入器功能

