



艾歐骨得注射筆 使用方法(1)


初次使用前準備

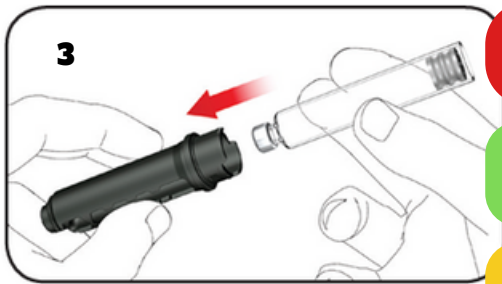

1 打開筆蓋

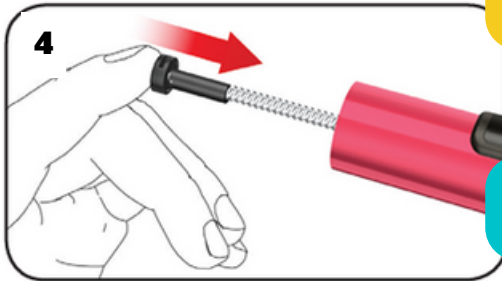


2 轉動並將卡式管架取出

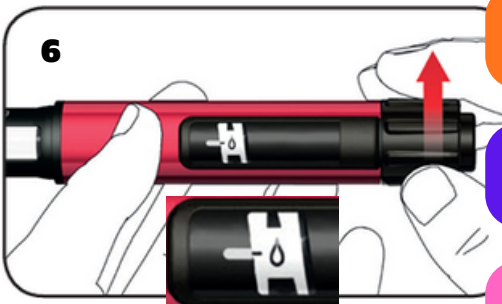


3 將新的卡式管插入卡式管架內


如果卡式管是渾濁、變色或含有顆粒，請勿使用。

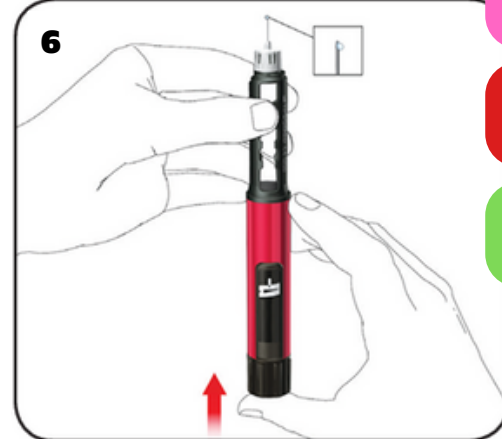

4 筆直推回螺紋桿到定點

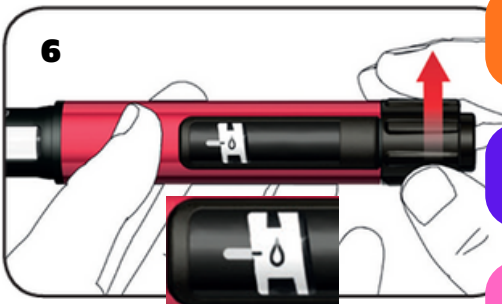


5 將卡式管架旋轉固定回筆身

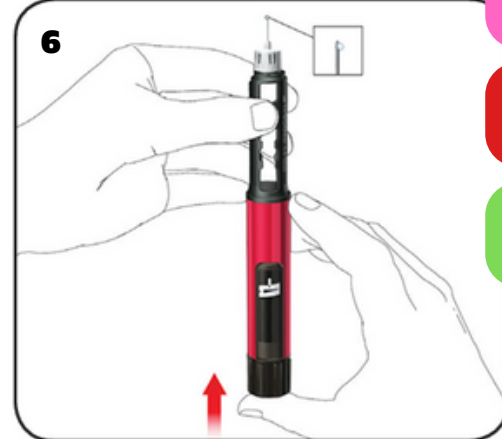


3 撕下針頭保護膜並旋入注射筆


注意：筆直且緊密的旋入！

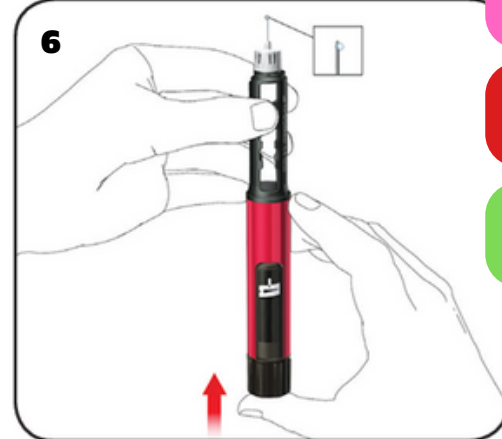

4 取下針頭外蓋

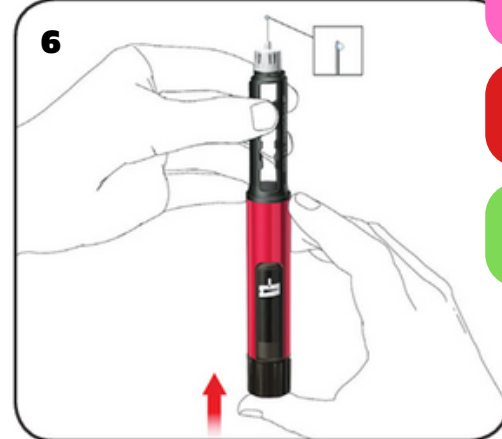

5 取下針頭內蓋並丟棄

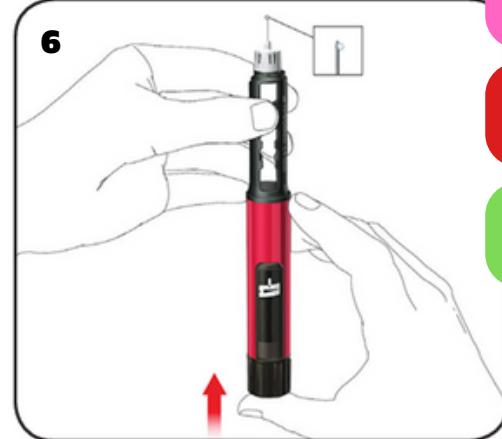

6 旋轉至水滴圖示進行充填測試


(在插入新卡式管之後及每支卡式管的第一劑注射之前，才需進行此測試)

針頭頂端應有藥液出現。若無，可重複最多4次直到出現

此為簡易版衛教單張，若需更詳細介紹請參考藥品仿單

艾歐骨得注射筆 使用方法(2)

雙手洗淨再開始以下步驟！

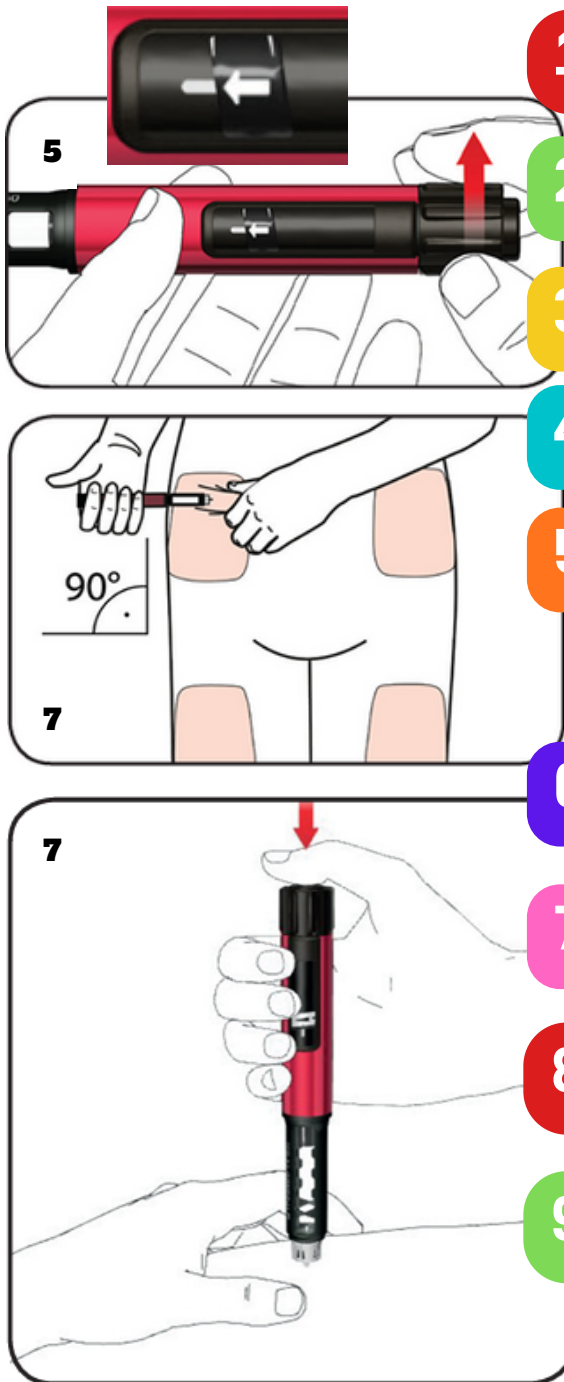

1 打開筆蓋

2 撕下針頭保護膜並旋入注射筆
注意：筆直且緊密的旋入！

3 取下針頭外蓋

4 取下針頭內蓋並丟棄

5 旋轉劑量旋鈕設定劑量
順時針旋轉劑量旋鈕直至無法進一步旋轉。確保顯示視窗出現箭頭符號，且與指示條紋對齊。

6 以酒精棉片消毒欲施打之部位
由內往外消毒，待酒精乾後再注射。

7 插入皮膚並按壓按鈕到底
針頭與皮膚成90度垂直注射

8 停留10秒後再拔出注射筆
按鈕持續按著直到拔出注射筆

9 蓋回針頭外蓋取下針頭並丟棄
用過的針頭集中在不易被穿刺的容器，並用蓋子栓緊，帶回醫院回收。

使用完畢後盡速將注射筆放回2-8°C的冰箱冷藏！

此為簡易版衛教單張，若需更詳細介紹請參考藥品仿單