


# 歐密拓注射筆 使用方法(1)

## 設定劑量與裝填藥匣

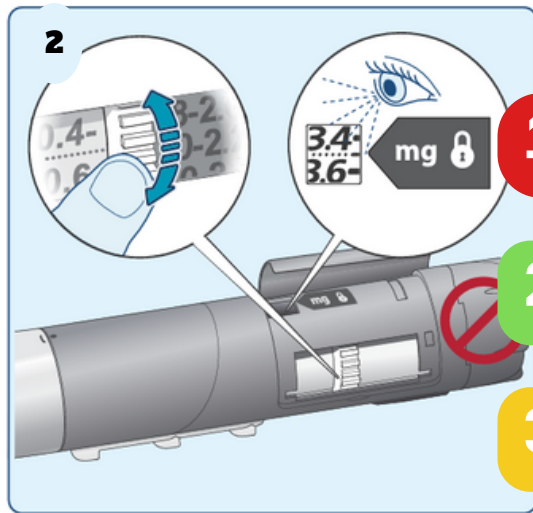

1

### 打開劑量記憶蓋

劑量若是奇數不會顯示，會以虛線 ... 表示


2

### 轉動白色劑量設定轉輪

將所需劑量對齊旁邊的鎖定符號

3

### 蓋上劑量記憶蓋

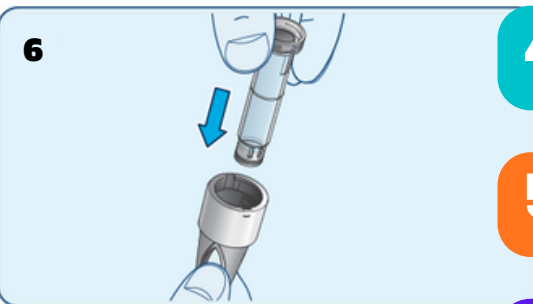


4

### 拔開筆蓋

5

### 轉開鎖定環

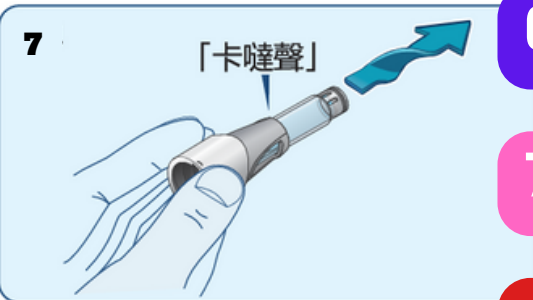

6

### 將藥匣插入鎖定環

窄的一端先進入

7


### 轉動藥匣並將其拉進鎖定環

聽到「卡噠」聲代表固定完成

8

### 將藥匣和鎖定環轉緊回注射筆

確認鎖定環上的半圓與注射筆上圓點對齊

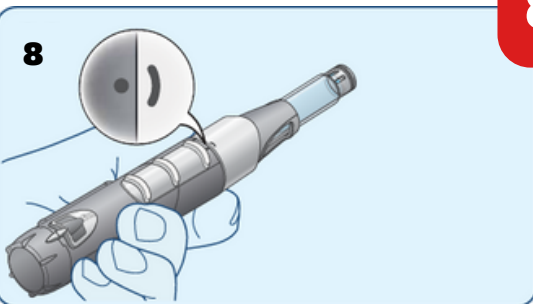

此為簡易版衛教單張，若需更詳細介紹請參考藥品仿單

# 歐密拓注射筆 使用方法(2)

雙手洗淨再開始以下步驟！

**1 以酒精棉片消毒灰色橡皮膜**

**2 撕下針頭保護膜並旋入注射筆**  
注意：筆直且緊密的旋入！

**3 取下針頭外蓋**

**4 向右旋轉劑量旋鈕直到有阻力**

**5 以酒精棉片消毒欲施打之部位**  
由內往外消毒，待酒精乾後再注射。

**6 接上針頭遮蓋**  
若注射時不想看到針頭，可接上遮蓋，若是不在意可省略此步驟


**7 取下針頭內蓋**

**8 插入皮膚並將按鈕向下滑動到底**  
此時劑量旋鈕會自動轉動直至停止

**9 停留10秒後再拔出注射筆**  
按鈕持續壓著直到拔出注射筆



**10 蓋回針頭外蓋**  
若是有安裝針頭遮蓋，先取下遮蓋再蓋回針頭外蓋

**11 取下針頭並丟棄**  
用過的針頭集中在不易被穿刺的容器，並用蓋子栓緊，帶回醫院回收。

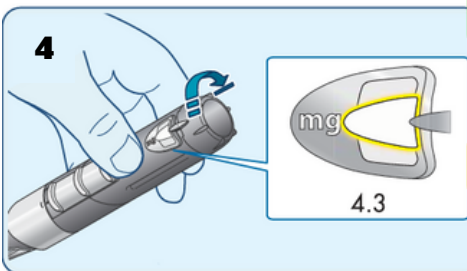

選擇性：使用針頭遮套

如果您在注射時不想看到注射筆針頭，請接上針頭遮套。

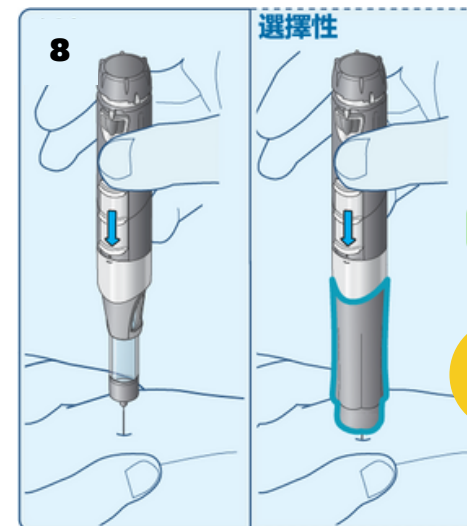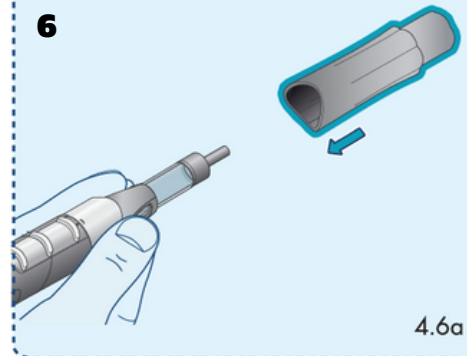

使用完畢後盡速將注射筆放回2-8°C的冰箱冷藏！

此為簡易版衛教單張，若需更詳細介紹請參考藥品仿單