


胰妥讚注射筆 使用方法

雙手洗淨再開始以下步驟！

3

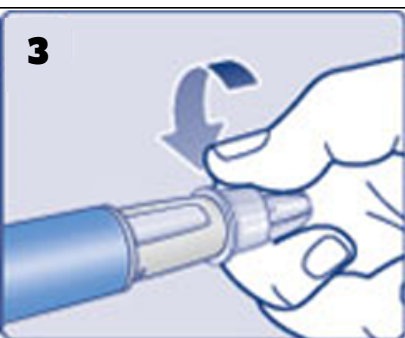

1

打開筆蓋

確認注射液有無變色、混濁或有顆粒，若有，則不可使用！

2

以酒精棉片消毒注射筆橡皮膜

3

撕下針頭保護膜並旋入注射筆

注意：筆直且緊密的旋入！

4

取下針頭外蓋

5

取下針頭內蓋並丟棄

6

設定排空劑量排空(初次使用才要)

針頭頂端應有藥液出現。若無，最多可重複6次直到出現，超過6次則需更換針頭再嘗試

7

設定您需施打之劑量

8

以酒精棉片消毒欲施打之部位

由內往外消毒，待酒精乾後再注射。

9

插入皮膚並按壓按鈕到底

針頭與皮膚成90度垂直注射

10

停留10秒後再拔出注射筆

按鈕持續按著直到拔出注射筆

11

蓋回針頭外蓋取下針頭並丟棄

用過的針頭集中在不易被穿刺的容器，並用蓋子栓緊，帶回醫院回收。



此為簡易版衛教單張，若需更詳細介紹請參考藥品仿單



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
聖保祿醫院
SAINT PAUL'S HOSPITAL