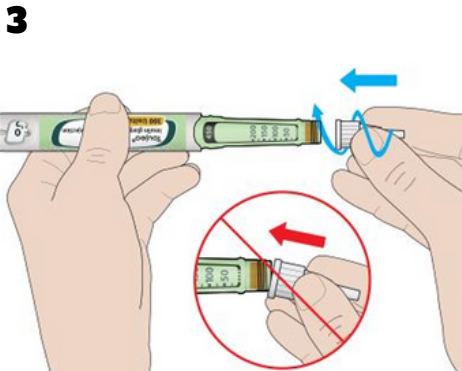
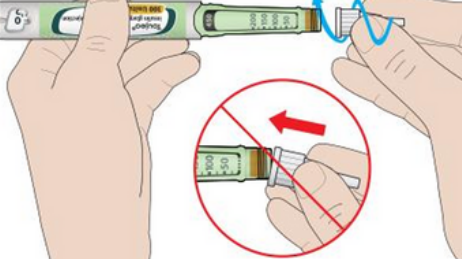
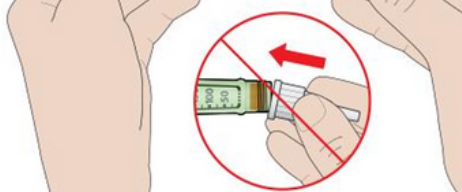
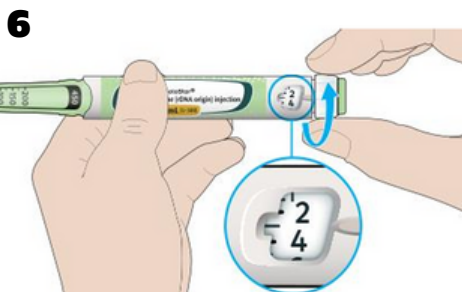
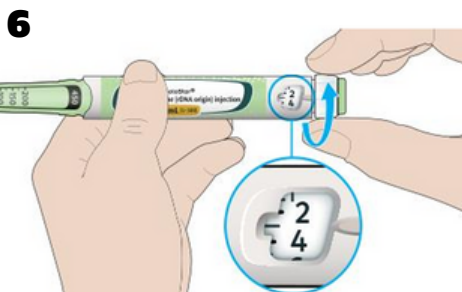
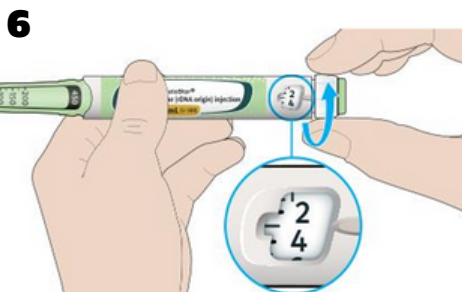
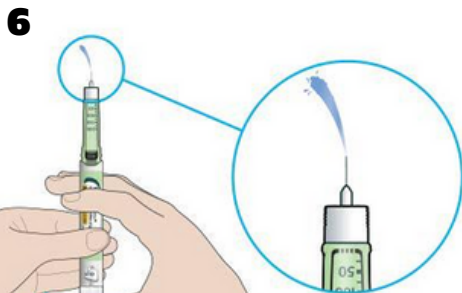
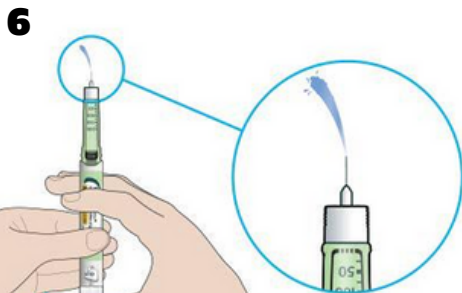
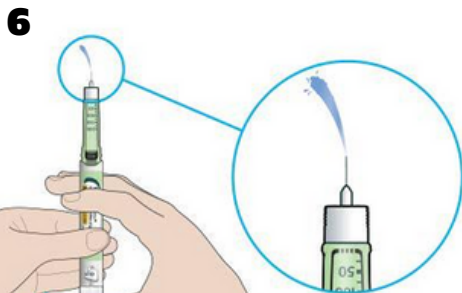
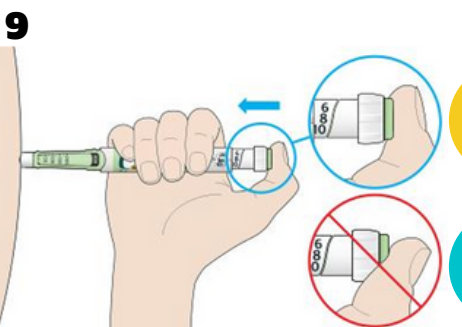
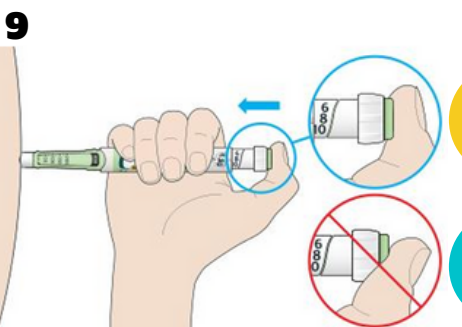


糖德仕注射劑 使用方法

雙手洗淨再開始以下步驟！

- **1 打開筆蓋**
確認注射液有無變色、混濁或有顆粒，若有，則不可使用！
- **2 以酒精棉片消毒注射筆橡皮膜**
- **3 撕下針頭保護膜並旋入注射筆**
注意：筆直且緊密的旋入！
- **4 取下針頭外蓋**
- **5 取下針頭內蓋並丟棄**
- **6 設定3U劑量進行安全性測試**
針頭頂端應有藥液出現。若無，可重複3次直到出現，超過3次則更換針頭再嘗試
- **7 設定您需施打之劑量**
- **8 以酒精棉片消毒欲施打之部位**
由內往外消毒，待酒精乾後再注射。
- **9 插入皮膚並按壓按鈕到底**
針頭與皮膚成90度垂直注射
- **10 停留10秒後再拔出注射筆**
按鈕持續按著直到拔出注射筆
- **11 蓋回針頭外蓋取下針頭並丟棄**
用過的針頭集中在不易被穿刺的容器，並用蓋子栓緊，帶回醫院回收。

此為簡易版衛教單張，若需更詳細介紹請參考藥品仿單